




Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecna.com.br

Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

BATERÍA DE EXTRACCIÓN TIPO SEBELIN/SOXHLET TE-1881/6

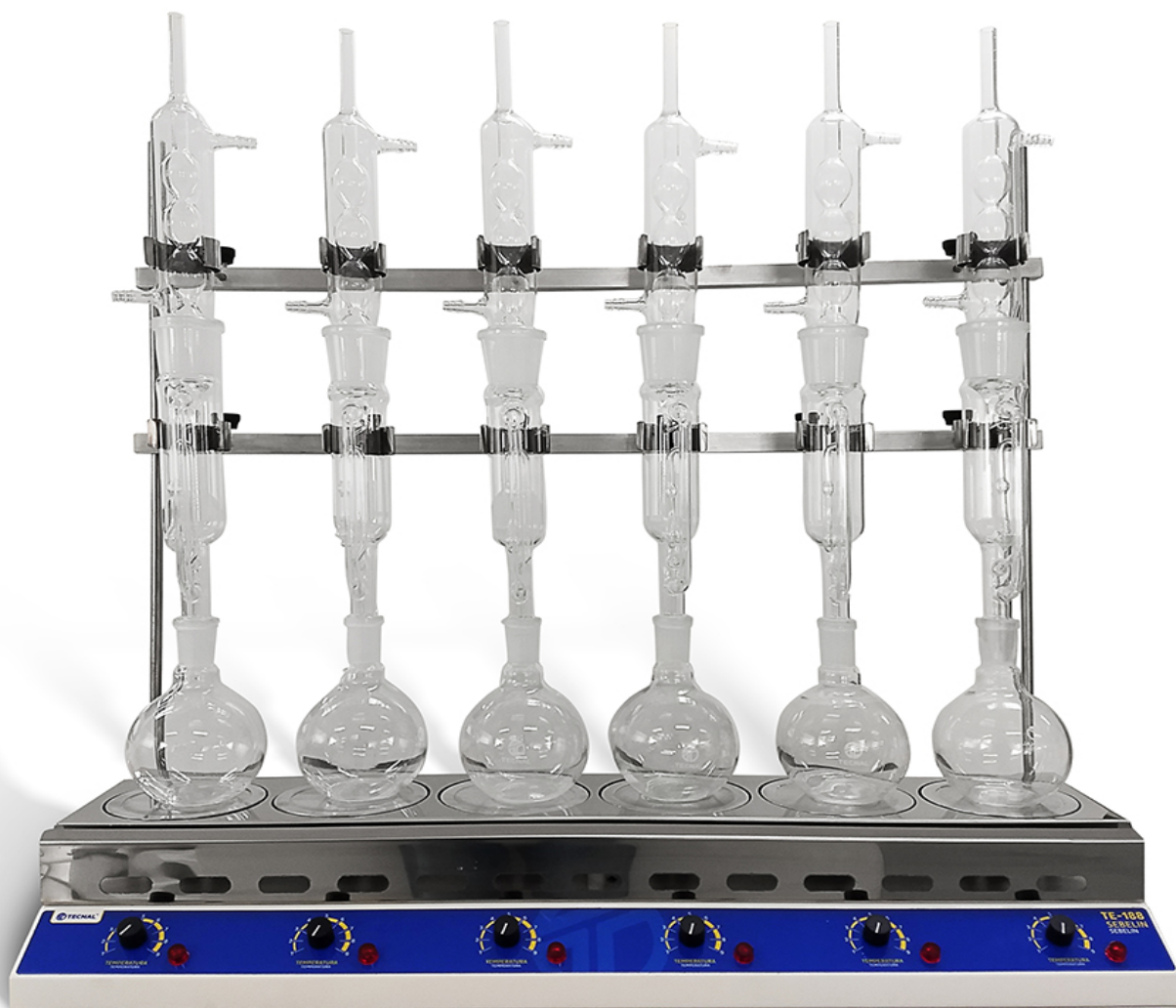

Utilizada en la extracción de residuos grasos, lípidos y grasas, por solventes, por el método Soxhlet y de calentamiento en general.

Características Tecnicas

Temperatura en la placa:	hasta 320°C.
Control de temperatura:	analógico individual por potenciómetro.
Capacidad:	6 pruebas.
Indicador de accionamiento de la resistencia (calentamiento):	por led.
Placa de calentamiento:	en aluminio macizo Ø 120mm.
Resistencia:	blindada inoxidable.
Soporte del condensador:	en aluminio con garras en acero inoxidable.
Gabinete:	en acero carbono con tratamiento anti-corrosivo y pintura electrostática
Soporte y protección de la resistencia:	inoxidable 304.
Dimensiones:	Ancho = 800 x profundo = 270 x alto = 740 mm.
Potencia:	2400w.
Tensión:	220v 50/60 hz.
Peso:	12 kg.
Nota:	no viene con vidriería.

Beneficios y Ventajas

- El nuevo sistema de calentamiento, proyectado en aluminio laminado y con resistencia blindada, proporciona una mayor seguridad al usuario
- Presenta un sistema de protección en acero inoxidable, para evitar accidentes durante el uso del equipo
- Mayor precisión y homogeneidad: el nuevo sistema de calentamiento también promueve una mayor área de contacto con los balones aforados, dejando el calentamiento más uniforme en su superficie
- Más agilidad: con más área de contacto, la transferencia de calor se vuelve más eficiente, dejando el análisis más rápido
- La muestra no permanece en contacto directo con el solvente caliente, lo que evita la descomposición de la grasa (extracción por frío)
- Trabaja hasta con 6 pruebas con programación independiente de la temperatura
- Sistema interconectado de tubería para uso de un baño termostático para la refrigeración de los condensadores, lo que garantiza una grande economía de agua
- Vidriería de cambio rápido por encajes esmerilados para una mejor practicidad
- Sistema de ajuste de la vidriería por garras de articulación frente y trasera para una mejor agilidad
- Gabinete: acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática, lo que aumenta el tiempo de vida útil del equipo
- Posee un sistema LED que indica el accionamiento de la resistencia. Se puede trabajar individualmente

- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecna.com.br